


Dental Mapping DICOM Gateway

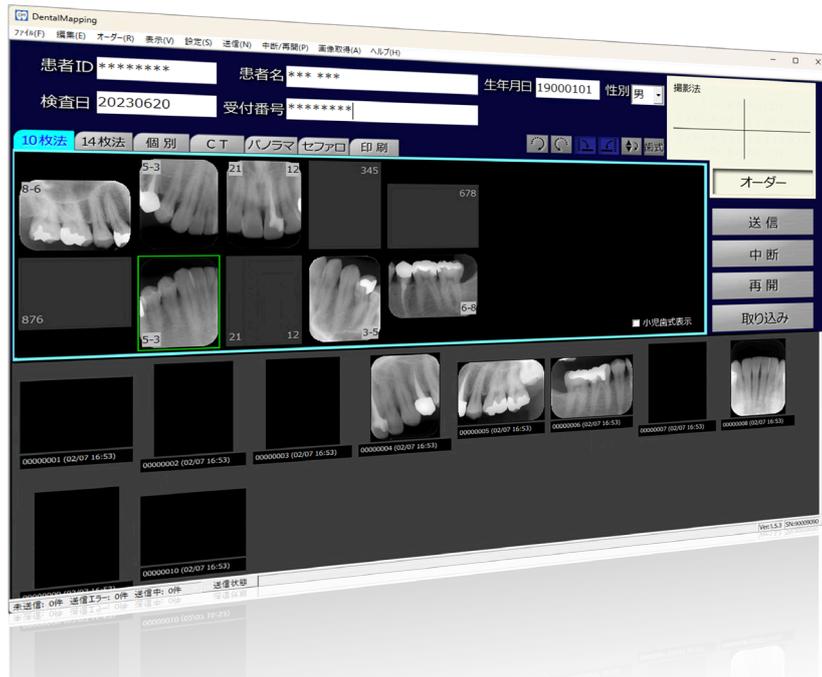

シンプルな操作で歯科用画像をDICOM化する
ゲートウェイソフトウェア。
患者情報・検査情報・歯式情報を付加し、
DICOM画像サーバーに送信します。

DICOM

for dental imaging

Dental Mapping おもな機能


マッピング 10枚法、12枚法、14枚法、咬合法、咬翼法、個別、パノラマ、セファロのテンプレートを選択し、ドラッグ&ドロップの操作で簡単にマッピングでき、歯式も付加できます。また、10枚法、12枚法、14枚法については自動で歯式を付加できます。マッピング領域の画像回転や反転も可能です。

任意の歯式設定 テンプレートを使わずに画像に任意の歯式を付加できます。

患者情報/オーダー情報取得 DICOMワークリストサーバーと接続し、患者情報やオーダー情報が取得できます。

DICOM画像サーバー送信 DICOM画像サーバーと接続し、画像送信ができます。

画像表示 画像を拡大表示し、画像調整ができます。

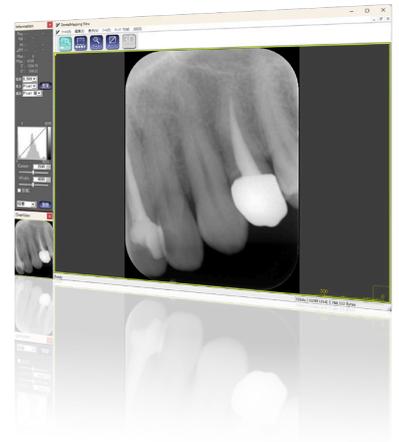

Dental MappingにアレイのCR装置“arcana mira”を組み合わせることで、DICOMに対応したデンタルソリューションを構築することができます。

Dental Mapping 推奨するシステム構成

OS	Windows 11、Windows 10
CPU	Core i5以上
メモリ	8GB以上
ストレージ	250GB以上の空き容量
USBポート	1つ以上の空き
ディスプレイ	1280×1024ピクセル以上表示可能なディスプレイ

 **Array Corporation** アレイ株式会社

151-0053 東京都渋谷区代々木3-42-10
tel. 03-3320-3911 fax 03-3320-3696 sales@array.co.jp
www.array.co.jp

© 2007-2025 Array Corporation
Dental Mapping、Dental Mapping ロゴは、アレイ株式会社の商標です。
この資料に記載されている会社、製品、サービスの名称は各社の商標または登録商標です。
この資料の記載内容は2025年6月現在のものです。
この資料に記載された内容、製品の仕様などは予告なく変更することがあります。